



Bedienungsanleitung



Pedalo Koordinationstrainer Reha S

Art.-Nr. 02320

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Pedalo Trainer

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Anleitung

553052 pedalo® - Reha S

Anleitung bitte **vor** der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren



Inhalt:
Teleskopstützen x2

Trittbretter inkl.
Flanschachsen x2

Universal Mittelräder x2

Außenräder mit Aufdruck x4

Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen

Achtung! Das pedalo® ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Achtung! Das pedalo® nicht im Straßenverkehr oder auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern- Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das pedalo® ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Achtung! Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

Achtung! Besteigen Sie das pedalo® immer zuerst auf dem unteren Trittbrett!!

Achtung! Nur auf ebenem Gelände mit glattem festem Belag verwenden. Beim Tragen des pedalo® niemals zwischen die Trittbretter greifen – KLEMMGEFAHR!

Achtung! Es ist darauf zu achten, dass die Füße nicht von den Trittbrettern rutschen.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gelegentlich etwas Öl an die pedalo®-Achsen geben. Dazu Gerät hochkant stellen und in die Bohrungen der Trittschalen etwas Öl geben.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt


Die Maximale Belastbarkeit beträgt 250 kg

Montage der Räder:

(Trittbretter und Räder sind normalerweise schon vormontiert)

Verschrauben Sie die Räder mit den an den Trittbrettern montierten Flanschachsen.

Je Rad 2 St. M 10 x 24 mm Senkkopfschrauben.

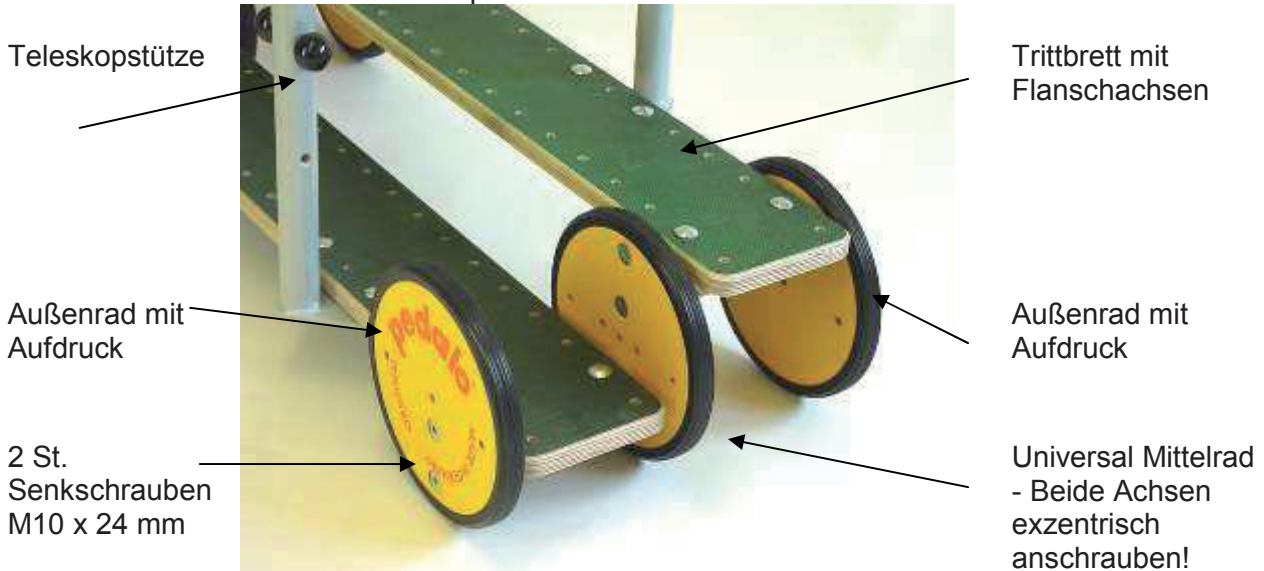

Montage Teleskopstützen:

Die Stützen werden seitlich an den Trittbrettern angeschraubt werden. Je Stütze werden 2 St. Schrauben M8 x 40 mm von oben im Abstand von 10 cm durch die Systembohrungen am Trittbrett gesteckt. Von unten nun die Stützenlasche mit je 2 St. Muttern mit Unterlegscheiben fest anschrauben. Schrauben gelegentlich nachprüfen!

Die Stützen lassen sich stufenlos in der Höhe einstellen. Klemmhebel lösen. Klemmhebel senkrecht hochklappen.

Jetzt die Stütze auf passende Höhe einstellen.

Klemmhebel wieder bis zum Anschlag schließen.

Stütze nicht über die Maximalhöhe ausziehen!

Die Zweite Stütze kann Dank der Skala auf die gleiche Höhe eingestellt werden.

Letzte Kontrolle vor dem Start:

Bewegen Sie Ihr Pedalo® zunächst mit der Hand vor und zurück. Es soll sich leicht bewegen lassen, ohne zu streifen. Sind alle Radmuttern angebracht und fest verschraubt?

Das Reha-Pedalo® niemals ohne Stützen verwenden.

Die Vorzüge der Pedalo® „S“ Serie

Bauen Sie Ihr Pedalo® ganz nach Ihren Vorstellungen um. Mit wenigen Erweiterungsteilen können eine Vielzahl von Varianten erreicht werden.

Spurverbreiterung durch Abstandhalterset
5 od. 10 cm

Barren-Pedalo® „S“

Reit-Pedalo® „S“





==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0

Fax: +49 (0) 6331 1480-220

E-Mail: info@sport-tec.de

Web: www.sport-tec.de