



# Bedienungsanleitung



**Reha-Wippbrett, LxBxH 60x85x15 cm**

**Art.Nr.: 02608**

**▶▶▶ [zum Produkt ...](#)**


**Pedalo Trainer**

**▶▶▶ [zur Kategorie...](#)**

## Anleitung

# 653138 pedalo®- Reha – Wipp

Anleitung bitte lesen und aufbewahren

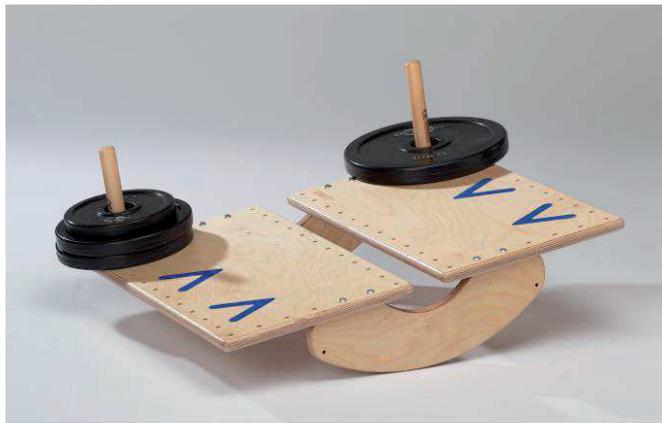

### Allgemeine- und Warnhinweise:

**Achtung!** Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

**Achtung!** Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

**Achtung!** Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.

**Achtung!** Das Gerät nur auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 4 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 150 kg

### Montage:


1. Verschrauben Sie die beiden Basisbretter 60 x 35cm (Längsseite an Längsseite) über die beiden Schaukelkufen miteinander. Verwenden Sie dazu pro Schaukelkufe 4 St. M6 x 6 cm Schrauben inkl. der entsprechenden Querlochmuttern für die Schaukelkufen. Die Querlochmuttern so einsetzen, dass der Schlitz sichtbar ist und in Richtung des Schraubenlochs zeigt.

2. Die Rundstäbe zur Aufnahme der Gewichte werden von unten seitlich an den Basisbretter mit je einer M6 x 5 cm Schraube angeschraubt. Zwischen Rundstab und Basisbrett je eine große Unterlegscheibe unterlegen.  
**Die Gewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

3. An allen vier Ecken des Gerätes wird je ein Gummipuffer von unten angeschraubt. Vorher in die Eckbohrungen der Basisbretter je eine Hülsenmutter von oben einsetzen.

### Zubehör:

**Fußwippen 653101**  
Zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrads.

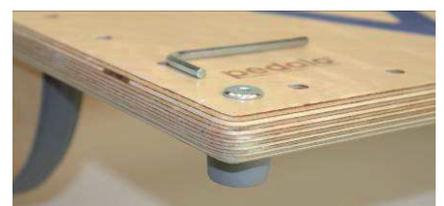

**Festhaltstützen stufenlos höhenverstellbar. 520154**  
Siehe Bild oben links.



**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de