



DE 

EN 

FR 

IT 

ES 

NL 

## DESTIX DESINFEKTIONSTÜCHER

DESTIX DISINFECTANT WIPES

Art.-Nr.  28586 · Kategorie:  Präparate

## HERZLICH WILLKOMMEN BEI SPORT-TEC

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Sport-Tec Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit. In dieser Anleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zur Verwendung. Bei weiteren Fragen, sprechen Sie uns bitte an - wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Sport-Tec Team

---

## WELCOME TO SPORT-TEC

Thank you for your purchase. We are pleased that you have opted for a Sport-Tec product and hope that you really enjoy using it. In this manual, you will find all the important information for use. If you have any further questions, please contact us – we will be happy to help you.

Your Sport-Tec team

---

## BIENVENUE CHEZ SPORT-TEC

Nous vous remercions pour votre achat. Nous sommes ravis que vous ayez choisi pour un produit Sport-Tec et espérons que vous en profiterez bien. Ce manuel contient toutes les informations importantes pour utiliser le produit. Pour toute question, veuillez nous contacter ; nous serons ravis de vous aider.

L'équipe Sport-Tec

---

## TI DIAMO IL BENVENUTO IN SPORT-TEC

Grazie per l'acquisto. Siamo lieti che tu abbia scelto un prodotto Sport-Tec e ci auguriamo tu te lo goda appieno. In questo manuale troverai tutte le informazioni importanti sul suo utilizzo. Se hai ulteriori domande, non esitare a contattarci: saremo lieti di aiutarti.

Il tuo team Sport-Tec

---

## LE DAMOS LA BIENVENIDA A SPORT-TEC

Gracias por su compra. Nos complace que se haya decidido por un producto Sport-Tec y deseamos que lo disfrute. En estas instrucciones encontrará toda la información necesaria para su uso. En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

Su equipo de Sport-Tec

---

## HARTELIJK WELKOM BIJ SPORT-TEC

Hartelijk dank voor uw aankoop. We zijn blij dat u voor een Sport-Tec-product heeft gekozen en wensen u daar veel plezier mee. In deze handleiding vindt u alle belangrijke informatie over het gebruik. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Uw Sport-Tec-team

---



## DE - ANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch. Befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

**S. 4-5**

---



## EN - MANUAL

Read this manual carefully before use. Follow the instructions, and keep this user manual in a safe place.

**S. 6-7**

---



## FR - INSTRUCTIONS

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. Suivez les instructions d'utilisation et conservez-le manuel d'utilisation soigneusement.

**S. 8-9**

---



## IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso. Seguire le istruzioni e conservare con cura le istruzioni per l'uso.

**S. 10-11**

---



## ES - INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto por primera vez. Siga las instrucciones y guarde las instrucciones de uso cuidadosamente.

**S. 12-13**

---



## NL - HANDLEIDING

Lees deze handleiding voor gebruik aandachtig door. Volg de instructies op en bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

**S. 14-15**

---

# ALLGEMEINES

DESTIX ist ein einzigartiges DGMH-gelistetes Desinfektionsmittel für Flächen aller Art in Arztpraxen, Krankenhäusern, Sanatorien, Heimen, Rettungsdienst usw.

- wirken nachhaltig gegen Bakterien, Viren, Hefen und Pilze
- schnelltrocknend, für streifenfreien Glanz.

## BIOZIDE SICHER VERWENDEN.

### VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.

#### GEFAHR:



Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## REINIGUNGSHINWEISE

DESTIX Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion für Flächen und Inventar in Arztpraxen, Heimen und Kliniken (z.B. Behandlungsstühle, Hand- und Winkelstücke).


Die Tücher sind nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten (z.B. Instrumente, Hörgeräte, Ohrspasstücke) geeignet. Wirksam gegen Bakterien, Pilze und begrenzt viruzid PLUS.

**Einwirkzeit:** Nach EN Prüfnormen: 1 min bei hoher Belastung.

**Anwendung:** Nur auf alkoholbeständigen und nicht porösen Oberflächen verwenden. Oberfläche gründlich mit einem feuchten Desinfektionstuch abreiben. Die Flüssigkeit 1 Minute einwirken lassen. Rückstände auf der Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken reiben. Das Tuch reicht für eine Fläche von 30 x 30 cm.

## HINWEISE ZUR BENUTZUNG

Deckel der Spenderdose abnehmen, Beutel oben aufschneiden (Tücher im Beutel lassen). Das erste Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Spenderöffnung ziehen, anschließend Deckel aufsetzen. Zur leichten Einzelentnahme Tuch schräg nach vorn abreißen. Nach Gebrauch Deckel schließen.

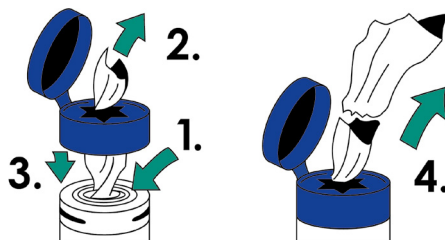

# INHALT

## DESTIX MA61

100 g Desinfektionsflüssigkeit enthält: Ethanol: 24 g, 1-Propanol: 37 g

## AUSZUG DER GETESTETEN MIKROORGANISMEN

Microorganismus	Kontaktzeit
Staphylococcus aureus + MRSA	1 Min
Escherichia coli	1 Min
Enterococcus hirae	1 Min
Pseudomonas aeruginosa	1 Min
Candida albicans	1 Min
Aspergillus niger	1 Min
Mycobacterium terrae	1 Min
Mycobacterium avium	1 Min
BVDV	1 Min
Vaccina	1 Min
Nora	1 Min
Rota	1 Min
Herpes Simplex Virus	5 Min
Adenovirus	5 Min

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Art.-Nr.	DESTIX Desinfektionstücher			DESTIX Desinfektionstücher XXL		
	28580	28582	28583	28584	28586	28587
Ausführung	Spenderbox	Nachfüllpack	Set	Spenderbox	Nachfüllpack	Set
Anzahl Tücher	120	120	240	200	200	400
Maße (BxLxH)	13x20 cm	13x20 cm	13x20 cm	21x26 cm	21x26 cm	21x26 cm
Fläche gesamt	3,12 m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup>	6,24 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	21,84 m <sup>2</sup>
Hersteller	ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, D-73054 Eislingsen/Fils., <a href="http://www.destix.info">www.destix.info</a>					
Ursprungsland	Made in Germany					

## GENERAL INFORMATION

DESTIX is a unique disinfectant which is universally usable.

- effective against all bacteria, viruses, yeasts and fungi
- reliably prophylactic against the formation of resistance.

## USE BIOCIDES SAFELY.

**ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.**

### DANGER:



Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye damage. May cause drowsiness and dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke. Avoid inhalation of vapour. Wear protective gloves. Get medical advice/attention if you feel unwell.

**IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove any contact lenses if possible. Continue rinsing. If eye irritation persists: Seek medical advice / attention.

Store in a closed container. Repeated contact may lead to chapped or cracked skin.

## CLEANING INSTRUCTIONS

DESTIX disinfectant wipes are ready-to-use wipes for rapid disinfection of surfaces and equipment in doctors' surgeries, care homes and clinics (e.g. treatment chairs, handpieces and contra-angle handpieces).


The wipes are not suitable for disinfecting invasive medical devices (e.g. instruments, hearing aids, ear moulds). Effective against bacteria, fungi and limited virucidal PLUS.

**Exposure time:** According to EN test standards: 1 min at high load.

**Application:** Only use on alcohol-resistant and non-porous surfaces. Wipe the surface thoroughly with a damp disinfectant wipe. Allow the liquid to act for 1 minute. Rub any residue on the surface dry with a clean, dry cloth. The cloth is sufficient for an area of 30 x 30 cm.

## NOTES ON USE

Open the lid of the tub, and cut open the bag, leaving the tissues inside the pouch. Pull the tissue from the middle through the distribution hole, then close the lid. For easy single tissue use, pull at an angle before tearing, then close the lid after use.

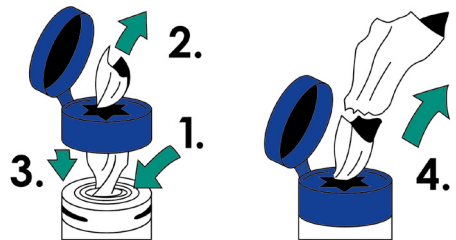

# CONTENTS

## DESTIX MA61

100 g disinfectant liquid contains: Ethanol: 24 g, 1-propanol: 37 g

## EXTRACT OF THE MICROORGANISMS TESTED

Microorganism	Contact time
Staphylococcus aureus + MRSA	1 Min
Escherichia coli	1 Min
Enterococcus hirae	1 Min
Pseudomonas aeruginosa	1 Min
Candida albicans	1 Min
Aspergillus niger	1 Min
Mycobacterium terrae	1 Min
Mycobacterium avium	1 Min
BVDV	1 Min
Vaccina	1 Min
Nora	1 Min
Rota	1 Min
Herpes Simplex Virus	5 Min
Adenovirus	5 Min

## PRODUCT FEATURES

Part. no.	DESTIX disinfectant wipes			DESTIX disinfectant wipes XXL		
	28580	28582	28583	28584	28586	28587
Type	Dispenser	Refill pack	Set	Dispenser	Refill pack	Set
Number of wipes	120	120	240	200	200	400
Dimensions (LxWxH)	13x20 cm	13x20 cm	13x20 cm	21x26 cm	21x26 cm	21x26 cm
Total surface	3,12 m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup>	6,24 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	21,84 m <sup>2</sup>
Manufacturer	ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, D-73054 Eisligen/Fils., www.destix.info					
Country of origin	Made in Germany					

# GÉNÉRALITÉS

DESTIX est un désinfectant unique listé par la DGMH pour les surfaces de tous types dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les sanatoriums, les foyers, les services de secours, etc.

- agit durablement contre les bactéries, les virus, les levures et les champignons
- sèche rapidement, pour un brillant sans traces.

## UTILISER LES BIOCIDES EN TOUTE SÉCURITÉ.

**TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER.**

**DANGER :**



Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque de graves lésions oculaires. Peut provoquer somnolence et vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. En cas de malaise, consulter un médecin/une aide médicale.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever si possible les lentilles de contact éventuellement présentes. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : demander un avis médical/une aide médicale. Conserver dans un récipient fermé. Un contact répété peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les lingettes désinfectantes DESTIX sont des lingettes prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide des surfaces et de l'inventaire dans les cabinets médicaux, les foyers et les cliniques (par ex. fauteuils de soins, pièces à main et contre-angles).


Les lingettes ne sont pas adaptées à la désinfection des dispositifs médicaux invasifs (par ex. instruments, appareils auditifs, embouts auriculaires). Efficace contre les bactéries, les champignons et virucide limité PLUS.

**Temps d'action :** selon les normes d'essai EN : 1 min en cas de forte charge.

**Application :** Utiliser uniquement sur des surfaces résistantes à l'alcool et non poreuses. Frotter soigneusement la surface avec un chiffon désinfectant humide. Laisser agir le liquide pendant 1 minute. Sécher les résidus sur la surface avec un chiffon propre et sec. Le chiffon suffit pour une surface de 30 x 30 cm.

## CONSEILS D'UTILISATION

Retirer le couvercle du distributeur, couper le sachet en haut (laisser les lingettes dans le sachet). Tirer la première lingette du centre du rouleau à travers l'ouverture du distributeur, puis remettre le couvercle. Pour faciliter le prélèvement individuel, déchirer la lingette en biais vers l'avant. Fermer le couvercle après utilisation.

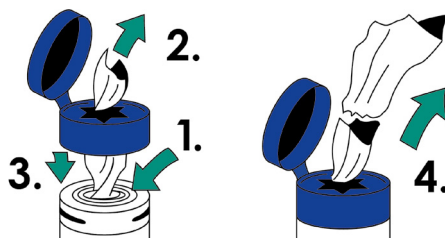



# CONTENU

## DESTIX MA61

100 g de liquide désinfectant contient : éthanol : 24 g, 1-propanol : 37 g

## EXTRAIT DES MICRO-ORGANISMES TESTÉS

Micro-organisme	Temps de contact
Staphylococcus aureus + SARM	1 Min
Escherichia coli	1 Min
Enterococcus hirae	1 Min
Pseudomonas aeruginosa	1 Min
Candida albicans	1 Min
Aspergillus niger	1 Min
Mycobactérium terrae	1 Min
Mycobactérium avium	1 Min
BVDV	1 Min
Vaccina	1 Min
Nora	1 Min
Rota	1 Min
Virus de l'herpès simplex	5 Min
Adénovirus	5 Min

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

N° de référence	DESTIX lingettes désinfectantes			DESTIX lingettes désinfectantes XXL		
	Boîte distributrice	Recharge	Kit	Boîte distributrice	Recharge	Kit
Version	Boîte distributrice	Recharge	Kit	Boîte distributrice	Recharge	Kit
Nombre de lingettes	120	120	240	200	200	400
Dimensions (L x l x H)	13x20 cm	13x20 cm	13x20 cm	21x26 cm	21x26 cm	21x26 cm
Surface totale	3,12 m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup>	6,24 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	21,84 m <sup>2</sup>
Fabricant	ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, D-73054 Eisligen/Fils., www.destix.info					
Pays d'origine	Made in Germany					

## INFORMAZIONI GENERALI

DESTIX è un disinfettante unico nel suo genere, classificato dalla DGMH, per tutti i tipi di superfici di studi medici, ospedali, sanatori, case di cura, servizi di emergenza, ecc.

- ha un effetto duraturo contro batteri, virus, lieviti e funghi
- asciugatura rapida, per una lucentezza senza striature.

## UTILIZZARE I BIOCIDI IN MODO SICURO.

**LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PRIMA DELL'USO.**

### PERICOLO:



Liquido e vapori altamente infiammabili. Provoca gravi danni agli occhi. Può causare sonnolenza e vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare l'inalazione dei vapori. Indossare guanti protettivi. Consultare un medico in caso di malessere.

**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare con cautela con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

Conservare in un contenitore chiuso. Il contatto ripetuto può provocare screpolature o fessurazioni della pelle.

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Le salviette disinfettanti DESTIX sono salviette pronte all'uso per la disinfezione rapida di superfici e attrezzature in studi medici, case di cura e cliniche (ad es. poltrone per trattamenti, manipoli e contrangoli).


Le salviette non sono adatte alla disinfezione di dispositivi medici invasivi (ad es. strumenti, apparecchi acustici, stampi per orecchie). Efficaci contro batteri, funghi e con un limitato effetto virucida PLUS.

**Tempo di esposizione:** secondo gli standard di prova EN: 1 minuto a carico elevato.

**Applicazione:** Utilizzare solo su superfici resistenti all'alcol e non porose. Pulire accuratamente la superficie con una salvietta disinfettante umida. Lasciare agire il liquido per 1 minuto. Strofinare i residui sulla superficie con un panno pulito e asciutto. Il panno è sufficiente per un'area di 30 x 30 cm.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere il coperchio del dispenser, tagliare la parte superiore del sacchetto (lasciare le salviette nel sacchetto). Estrarre la prima salvietta dal centro del rotolo attraverso l'apertura del dispenser, quindi rimettere il coperchio. Per facilitare la rimozione individuale, strappare la salvietta in diagonale in avanti. Chiudere il coperchio dopo l'uso.

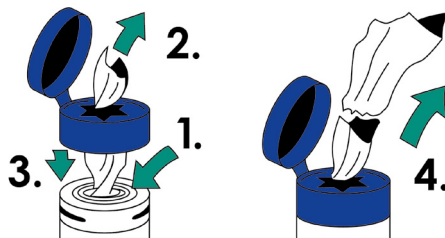

# CONTENUTI

## DESTIX MA61

100 g di liquido disinfettante contengono: Etanolo: 24 g, 1-propanolo: 37 g

## ESTRATTO DEI MICRORGANISMI TESTATI

Microorganismi	Tempo di contatto
Staphylococcus aureus + MRSA	1 Min
Escherichia coli	1 Min
Enterococcus hirae	1 Min
Pseudomonas aeruginosa	1 Min
Candida albicans	1 Min
Aspergillus niger	1 Min
Mycobacterium terrae	1 Min
Mycobacterium avium	1 Min
BVDV	1 Min
Vaccina	1 Min
Nora	1 Min
Rota	1 Min
Virus dell'herpes simplex	5 Min
Adenovirus	5 Min

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art.n.	DESTIX salviette disinfettanti			DESTIX salviette disinfettanti XXL		
	28580	28582	28583	28584	28586	28587
Tipo	Dispenser	Confezione di ricarica	Set	Dispenser	Confezione di ricarica	Set
Numero di salviette	120	120	240	200	200	400
Dimensioni (LxPxA)	13x20 cm	13x20 cm	13x20 cm	21x26 cm	21x26 cm	21x26 cm
Superficie totale	3,12 m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup>	6,24 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	21,84 m <sup>2</sup>
Produttore	ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, D-73054 Eislingen/Fils., <a href="http://www.destix.info">www.destix.info</a>					
Paese d'origine	Made in Germany					

## INFORMACIÓN GENERAL

DESTIX es un desinfectante único, clasificado por la DGMH, para todo tipo de superficies en consultas médicas, hospitales, sanatorios, residencias, servicios de urgencias, etc.

- tiene un efecto duradero contra bacterias, virus, levaduras y hongos
- secado rápido, para un brillo sin rayas.

## UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA.

**LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO.**

### PELIGRO:



Líquido y vapores altamente inflamables. Provoca lesiones oculares graves. Puede causar somnolencia y vértigo. Manténgase alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Evitar la inhalación de vapores. Llevar guantes de protección. En caso de malestar, acúdase a un médico.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si es posible, quítese las lentes de contacto. Continuar enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Conservar en un recipiente cerrado. El contacto repetido puede agrietar o agrietar la piel.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Las toallitas desinfectantes DESTIX son toallitas listas para usar para la desinfección rápida de superficies y equipos en consultas médicas, residencias de ancianos y clínicas (por ejemplo, sillones de tratamiento, piezas de mano y contraángulos).


Las toallitas no son adecuadas para la desinfección de dispositivos médicos invasivos (por ejemplo, instrumentos, audífonos, moldes auriculares). Eficaces contra bacterias, hongos y PLUS virucidas limitadas.

**Tiempo de exposición:** Según normas de ensayo EN: 1 min con carga elevada.

**Aplicación:** Utilizar únicamente en superficies resistentes al alcohol y no porosas. Limpiar bien la superficie con una toallita húmeda desinfectante. Deje que el líquido actúe durante 1 minuto. Seque cualquier residuo en la superficie con un paño limpio y seco. El paño es suficiente para una superficie de 30 x 30 cm.

## INDICACIONES DE USO

Retire la tapa del dispensador, abra la parte superior de la bolsa (deje las toallitas en la bolsa). Extraiga la primera toallita del centro del rollo a través de la abertura del dispensador y vuelva a colocar la tapa. Para facilitar la extracción individual, rasgue la toallita en diagonal hacia delante. Cierre la tapa después de cada uso.

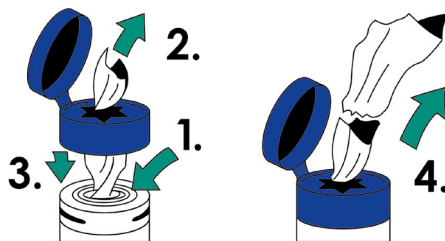

# CONTENIDO

## DESTIX MA61

100 g de líquido desinfectante contiene: Etanol: 24 g, 1-propanol: 37 g

## EXTRACTO DE LOS MICROORGANISMOS ANALIZADOS

Microorganismo	Tiempo de contacto
Staphylococcus aureus + SARM	1 Min
Escherichia coli	1 Min
Enterococcus hirae	1 Min
Pseudomonas aeruginosa	1 Min
Candida albicans	1 Min
Aspergillus niger	1 Min
Mycobacterium terrae	1 Min
Mycobacterium avium	1 Min
VDVB	1 Min
Vaccina	1 Min
Nora	1 Min
Rota	1 Min
Virus del herpes simple	5 Min
Adenovirus	5 Min

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

No. de artículo	DESTIX toallitas desinfectantes			DESTIX toallitas desinfectantes XXL		
	28580	28582	28583	28584	28586	28587
Tipo	dispensadora	paquete de recambio	juego	dispensadora	paquete de recambio	juego
Número de toallitas	120	120	240	200	200	400
Dimensiones (largo x ancho x alto):	13x20 cm	13x20 cm	13x20 cm	21x26 cm	21x26 cm	21x26 cm
Superficie total	3,12 m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup>	6,24 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	21,84 m <sup>2</sup>
Fabricante	ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, D-73054 Eisligen/Fils., www.destix.info					
País de origen	Made in Germany					

## ALGEMEEN

DESTIX is een uniek desinfectiemiddel op de DGMH-lijst voor alle soorten oppervlakken in dokterspraktijken, ziekenhuizen, sanatoria, verzorgingstehuizen, hulpdiensten, enz.

- heeft een langdurige werking tegen bacteriën, virussen, gisten en schimmels
- sneldrogend, voor een streeploze glans.

## GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG.

**LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.**

### GEVAAR:



Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Draag beschermende handschoenen. Roep medisch advies in als je je onwel voelt.

**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen. Indien oogirritatie aanhoudt: Een arts raadplegen.

In een gesloten verpakking bewaren. Herhaaldelijk contact kan leiden tot schrale of gebarsten huid.

## REINIGINGSINSTRUCTIES

DESTIX desinfectiedoekjes zijn gebruiksklare doekjes voor snelle desinfectie van oppervlakken en apparatuur in dokterspraktijken, verzorgingstehuizen en klinieken (bijv. behandelstoelen, hand- en hoekstukken).


De doekjes zijn niet geschikt voor het desinfecteren van invasieve medische hulpmiddelen (bijv. instrumenten, hoortoestellen, oorstukjes). Effectief tegen bacteriën, schimmels en beperkt virucide PLUS.

**Blootstellingstijd:** Volgens EN-testnormen: 1 min bij hoge belasting.

**Toepassing:** Alleen gebruiken op alcoholbestendige en nietporeuze oppervlakken. Veeg het oppervlak grondig af met een vochtig ontsmettingsdoekje. Laat de vloeistof 1 minuut inwerken. Wrijf eventuele resten op het oppervlak droog met een schone, droge doek. De doek is voldoende voor een oppervlak van 30 x 30 cm.

## AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Verwijder het deksel van de dispenser, knip de bovenkant van het zakje open (laat de doekjes in het zakje zitten). Trek het eerste doekje uit het midden van de rol door de opening van de dispenser en plaats het deksel terug. Scheur het doekje schuin naar voren af om het gemakkelijk afzonderlijk te kunnen verwijderen. Sluit het deksel na gebruik.

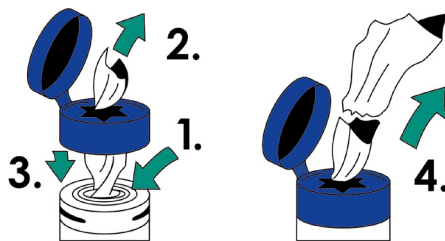

# INHOUD

## DESTIX MA61

100 g ontsmettingsvloeistof bevat: Ethanol: 24 g, 1-propanol: 37 g

## EXTRACT VAN DE GETESTE MICRO-ORGANISMEN

Micro-organisme	Contacttijd
Staphylococcus aureus + MRSA	1 Min
Escherichia coli	1 Min
Enterococcus hirae	1 Min
Pseudomonas aeruginosa	1 Min
Candida albicans	1 Min
Aspergillus niger	1 Min
Mycobacterium terrae	1 Min
Mycobacterium avium	1 Min
BVDV	1 Min
Vaccina	1 Min
Nora	1 Min
Rota	1 Min
Herpes Simplex-virus	5 Min
Adenovirus	5 Min

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Art.nr.	DESTIX ontsmettingsdoekjes			DESTIX ontsmettingsdoekjes XXL		
	28580	28582	28583	28584	28586	28587
Type	Doos	Navul- verpakking	Set	Doos	Navul- verpakking	Set
Aantal doekjes	120	120	240	200	200	400
Afmetingen (LxBxH)	13x20 cm	13x20 cm	13x20 cm	21x26 cm	21x26 cm	21x26 cm
Totale oppervlakte	3,12 m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup>	6,24 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	10,92 m <sup>2</sup>	21,84 m <sup>2</sup>
Fabrikant	ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, D-73054 Eisingen/Fils., <a href="http://www.destix.info">www.destix.info</a>					
Land van herkomst	Made in Germany					

Vertrieb durch:



**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)