



## WENEA RAPS ANLEITUNG

Art.-Nr.  29171 · Kategorie:  Therapie & Sinnestrainer

# Gebrauchsanweisung WeneaRaps


WeneaRaps wird zum Sensibilitäts- und Wahrnehmungstraining, zur taktilen Stimulation, zur Mobilisierung und zum Kraftaufbau der Hand- und Fingergelenke verwendet.

Im Rapsbad sind physiologische Bewegungen unter geringstem Widerstand möglich.

WeneaRaps ist ein Qualitätsprodukt, mehrfach gereinigt und auf Pilz- und Pestizidrückstände untersucht.

## Vorbereitung

Bei der Verwendung einer Ergonomiewanne wird die Wanneneinlage in dieser ausgebreitet. Dabei muss die Wanne kippstabil stehen. Die Ergonomiewanne gewährleistet eine bequeme und entspannte Körperhaltung. Nach der Anwendung wird die Wanneneinlage wieder verschlossen.

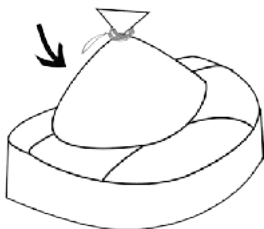

Bei der Verwendung eines FlexiSacks oder eines anderen Gefäßes ist ebenso auf einen kippstabilen Stand zu achten.

## Anwendung

Während der Anwendung werden die Hände in den WeneaRaps eingetaucht und aktiv oder passiv bewegt und massiert. Eine Anwendung dauert zwischen drei und 15 Minuten und kann mehrmals täglich wiederholt werden.

Vor der Anwendung alle Körperteile, die mit WeneaRaps in Berührung kommen, waschen und desinfizieren. Nach der Anwendung die betreffenden Körperteile säubern, besonders Fingerzwischenräume und Fingernägel und erneut desinfizieren.

Die Anwendung kann auch mit leicht gekühltem WeneaRaps durchgeführt werden. (Nicht kälter als Kühlschranktemperatur). Hierzu wird die verschlossene Wanneneinlage bzw. der FlexiSack im Kühlschrank aufbewahrt.

## Lagerung

Den WeneaRaps kühl, trocken sowie vor Verschmutzungen und Ungeziefer geschützt lagern, jedoch nicht luftdicht. Nicht im Gefrierfach lagern.

max. Lagertemperatur 25°C / max. Luftfeuchtigkeit 70%



trocken



Gebrauchsanweisung



max. 70%

# Was ist zu beachten

An Hautverletzungen, Wunden, Schürfungen oder Allergien nicht einsetzen. Bei Infektionserkrankungen nicht verwenden.

Bei der Anwendung in hygienisch sensiblen Bereichen, (wie z.B. in Pflegeheimen) und bei der Anwendung an den Füßen, darf der WeneaRaps nur von einer Person verwendet werden.

Nur zur äußeren Anwendung. Bei Kindern nur unter Aufsicht anwenden. Für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet. Bei Personen mit Temperaturregulationsstörung nur bei Zimmertemperatur verwenden.

**Vorsicht!** Auf herabgefallenen Rapskörnern besteht erhebliche Rutschgefahr. Herabgefallene Körner sind unverzüglich zu beseitigen ohne darauf zu treten.

Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten nicht in Berührung bringen. Sollte der WeneaRaps verschmutzen, schimmeln oder keimen, darf er nicht mehr verwendet werden.

Den WeneaRaps nach ca. 6 Monaten austauschen. Bei häufigem Gebrauch von verschiedenen Personen entsprechend früher. Der Raps kann in der Bioabfalltonne entsorgt werden.

Höchstens haltbar bis 9 Monate nach Abfülldatum.



Markus Schmid  
Tierstein 2  
78661 Dietingen  
Fon 0711-8879752  
0175-4412384  
[info@wenea.de](mailto:info@wenea.de)  
[www.wenea.de](http://www.wenea.de)

Bitte beachten!

Raps ist ein Naturprodukt. Deswegen kann es anfänglich während der Anwendungen zu schwarzen Verfärbungen an den Händen kommen. Das ist unbedenklich und leicht abwaschbar.

Stand August 2021



Physio & Fitness

==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)